



Jext® Trainer
Enthält keine Nadel und Flüssigkeit

1 Gelbe Sicherheitskappe abziehen




2 Halten Sie den schwarzen Nadelschutz gegen die Außenseite des Oberschenkels, dann drücken Sie den Fertippen in den Oberschenkel, bis Sie ein Klicken hören. Halten Sie den Pen dort für 10 Sekunden fest angedrückt.

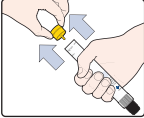


Nadel Ende

Jext® Trainer
Ne contient pas de substance active ni d'aiguille

1 Enlever le capuchon jaune

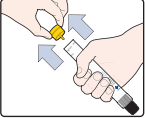


2 Poser l'extrémité noire contre l'extérieur de la cuisse et appuyer jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre. Maintenir en position pendant 10 sec.




Pointe de l'aiguille

Jext® Trainer
Bevat geen naald en medicatie

1 Verwijder de gele dop

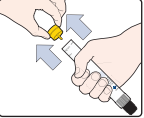

2 Zet de zwarte punt tegen de zijkant van het dijbeen, druk de injector daarna stevig in het dijbeen tot een "klik" te horen is en houd 10 seconden vast.



Naald-uiteinde

Jext® Trainer Nur für Übungszwecke

Jext® Trainer A des fins de information uniquement

Jext® Trainer Alleen bedoeld voor training

XXXXXXXXXX 100

RMA versie 06/2017

ALK
ALK-Abelló A/S
Bøge Allé 6-8,
DK-2970 Hørsholm
www.alk.net &
www.jext.com


Label back side

Hergebruik / Réinitialisation / Zurücksetzen

1. Plaats de gele veiligheidsdop terug op het einde van de Jext® Trainer / Remettez le capuchon jaune de sécurité au bout du Jext® Trainer / Stecken Sie die gelbe Sicherheitskappe auf das Ende des Jext® Trainer

2. Druk de zwarte injectiepunt op een stevige ondergrond tot u een klik hoort / Appuyez l'extrémité noire contre une surface dure jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre / Pressen Sie das schwarze Ende gegen eine feste Oberfläche bis Sie ein Klicken hören

This area is not visible on the labelled pen



ALK-ABELLÓ Madrid

Vare nr.: 1045229e Dato: 19.06.2017

Version No. RMA 06/2017

Label: 95 x 105 mm

Pt. Cool

186 Gray 4

Black

Cyan

Magenta

Yellow

Manuell

Stans

Technical approval	
Signature and Date:	Benny Harbo 19.06.2017
	Technical responsible person
This mock-up is proofread and in accordance with national text	
Signature and Date:	
	Person responsible for proofreading
This mock-ups is ready for implementation and if required, approved by national authorities	
Signature and Date:	
	Person responsible for proofreading